



LAMPES À PHOTOPOLYMÉRISER À HAUTE PUISSANCE



DV-50



VAFU

VAFU

Lentille XXL

Ø de 10 mm

3 niveaux de puissance

P1 3200 mW/cm²

P2 2400 mW/cm²

P3 1600 mW/cm²

3 modes

☐ pleine puissance

▤ progressif

⏏ pulsé

Tête orientable

à 360 degrés



Matière résistante, anti-rayure

Écran OLED avec indicateur de batterie

Sélecteur de modes et de temps d'exposition

Batterie de 2200mA

Photomètre

Chargement par induction

3 coloris : ● Titane ● Bleue ● Rouge


Lentille de 10 mm de diamètre

Photopolymérisez facilement des restaurations de grande taille en une seule fois.




Longueur d'onde efficace

pour la photopolymérisation des composites

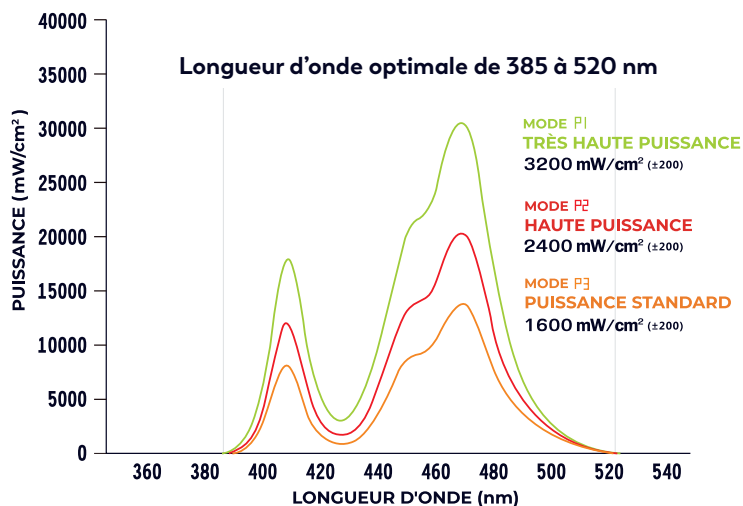

Détection des caries

Les caries peuvent être facilement détectées à l'aide de la tête de détection VAFU incluse avec la lampe.

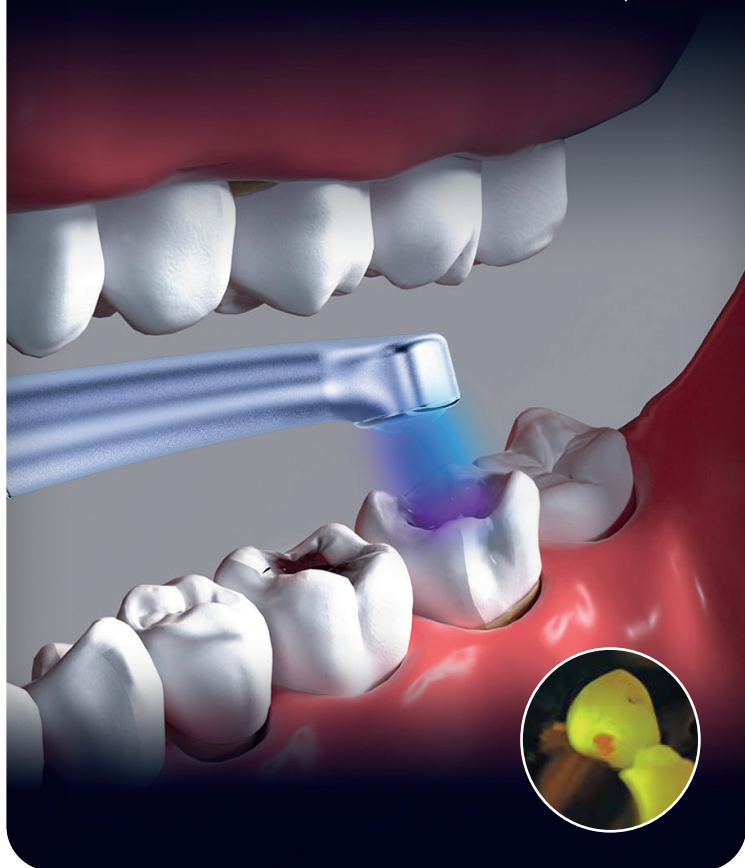


Une lumière plus ciblée

grâce à un angle d'éclairage d'environ 16°

3 types de lentilles

magnétiques à fibre optique

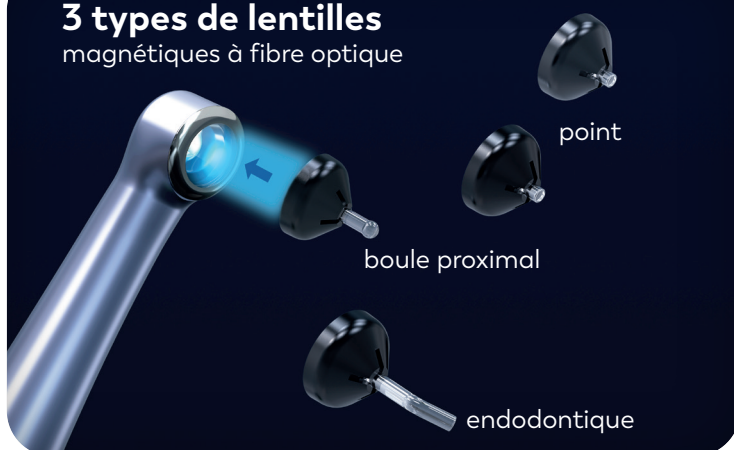

Protocole de charge Qi

Chargement sans fil plus intelligent et plus pratique



Une lumière plus nette

Faisceau uniforme et parallèle, forte pénétrabilité



DV-50

3 niveaux de puissance

(mW/cm²)

2600 / 1900 / 1300

3 modes

☐ pleine puissance

▤ progressif

▢ pulsé

Lentille XXL

Source lumineuse
50% plus grande,
Ø de 10 mm

Tête orientable
à 360 degrés



Corps métallique,
résistance à l'usure
et résistance
aux chutes

Batterie de 2000mA

Socle avec
recharge
sans fil

Photomètre

2 types de lentilles magnétiques à fibre optique



Lentille sphérique


Pour les petits composites
et utile pour construire des
contacts proximaux convexes.



Lentille endodontique


Pour la préparation
de l'apex radiculaire et
d'autres sténoses.

Durcissement à large spectre 385 - 515 nm

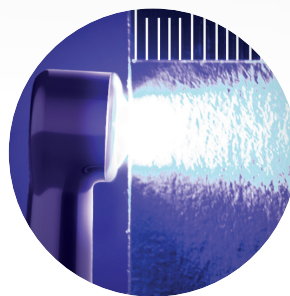

Lumière convergente uniforme et parallèle

Un lumière plus concentrée,
un meilleur rendement
énergétique.

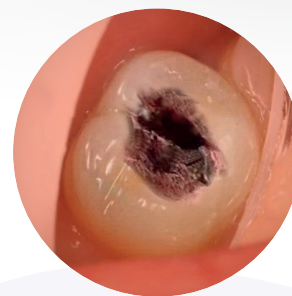

Détection des caries

Les caries peuvent être
facilement détectées grâce
à la tête de détection qui
affiche une couleur violette.